

	PT	Ficha Técnica Hoja Técnica Technical Data Sheet	Marca Marca Brand Blue Dent®
	ES		
	EN	Linha de produto / Línea de producto / Product line: Dentes Acrílicos / Dientes Acrílicos / Acrylic Teeth	


Idioma:	Português
Registro no MS-ANVISA:	80360110001
Classe de risco:	II
Composição:	Polimetacrilato de Metila EGDMA (Dimetacrilato de etilenoglicol) Pigmentos orgânicos Biocompatíveis Fluorescente
Apresentação:	Embalagem Posteriores: 10 placas Embalagem Anteriores: 16 placas Modelos Anteriores Superiores/Inferiores: 2D, 3D, 3M, 2N, 3N, 3P, A23, A25, A26, 263, 264, 266, 4H, 2P, 38 Modelos Posteriores Superiores/Inferiores: 30M, 32M, 30L, 32L, 34L Cores Trubyte®: 61, 62, 65, 66, 67 e 69.
Características:	<ul style="list-style-type: none"> *Angulação de 33° nos Posteriores; *Dupla Prensagem (Esmalte e Dentina); *Estabilidade de Cores; *Produzido com PMMA de alto peso molecular; *Ausência de bolhas e porosidades; *Alta resistência mecânica, química e a abrasão; *Aderência às Resinas acrílicas de base de próteses; *Pigmentos Biocompatíveis; *Fluorescência natural; *Proporcionalidade de estética e harmonia facial;
Instrução de Uso:	<p>Seguir os procedimentos usuais para escolha, montagem, articulação, acrilização, controle microbiológico, manutenção da prótese, bem como para proteção individual.</p> <p>Para melhor adesão dos dentes ao polímero da base da prótese, tirar o brilho da base do dente com uma lixa ou pedra abrasiva. Após isolamento da mufla e antes da aplicação da resina, limpar a base dos dentes com monômero de metilmetacrilato.</p> <p>Recomendação ao paciente: Para aumentar a durabilidade dos dentes, é recomendada, higienização diária sem uso de substâncias agressivas, como ácidos ou álcalis</p>


	PT ES EN	Ficha Técnica Hoja Técnica Technical Data Sheet	Marca Marca Brand
	Linha de produto / Línea de producto / Product line: Dentes Acrílicos / Dientes Acrílicos / Acrylic Teeth		Blue Dent®

Contra indicações:	Não existem efeitos colaterais adversos conhecidos, quando o produto é usado conforme os procedimentos usuais
Armazenamento:	Conservar ao abrigo de luz e calor.
Indicações de uso:	Os dentes Blue Dent são indicados para confecção de prótese dentária total e parcial.
Validade	6 anos a partir da data de fabricação.

Blue Dent

Químico Responsável: Rafael Gomes – CRQ 04263558
Registro MS-ANVISA N°: 80360110001

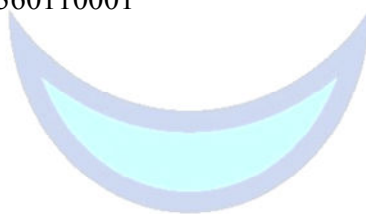

	PT	Ficha Técnica	Marca Marca Brand Blue Dent®
	ES	Hoja Técnica	
	EN	Technical Data Sheet	
Linha de produto / Línea de producto / Product line: Dentes Acrílicos / Dientes Acrílicos / Acrylic Teeth			

Idioma:	Español
Registro en MS-ANVISA:	80360110001
Clase de riesgo:	II
Composición:	Polimetilmetacrilato EGDMA (Dimetacrilato de etilenoglicol) Pigmentos orgánicos Biocompatibles Fluorescente
Presentación:	Embalaje Posteriores: 10 juegos Embalaje Anteriores: 16 juegos Modelos Anteriores Superiores e Inferiores: 2D, 3D, 3M, 2N, 3N, 3P, A23, A25, A26, 263, 264, 266, 4H, 2P, 38 Modelos Posteriores Superiores e Inferiores: 30M, 32M, 30L, 32L, 34L Colores Trubyte®: 61, 62, 65, 66, 67 y 69.
Características del producto:	<ul style="list-style-type: none"> *Angulación de 33° en los posteriores; *Prensado en dos capas (Esmalte y Dentina); *Estabilidad de colores; *Producido con PMMA de alto peso molecular; *Ausencia de burbujas y porosidades; *Alta resistencia mecánica, química y a abrasión; *Adherencia a las Resinas acrílicas de base de prótesis; *Pigmentos Biocompatibles; *Fluorescencia natural; *Proporcionalidad estética, armonía facial;
Instrucciones de uso:	<p>Seguir los procedimientos usuales para selección, montaje, articulación, polimerización, control microbiológico y mantenimiento de la prótesis, como para protección individual.</p> <p>Para mejor adhesión de los dientes al polímero de la base de la prótesis, quitar el brillo de la base del diente con una lija o piedra abrasiva. Después de aislada la mufla y antes de la aplicación de la resina, limpiar la base de los dientes con monómero de metilmetacrilato.</p> <p>Recomendaciones al paciente: Para aumentar la durabilidad de los dientes, es recomendada una higienización diaria sin uso de sustancias agresivas, como ácidos ou álcalis</p>

	PT	Ficha Técnica Hoja Técnica Technical Data Sheet	Marca Marca Brand Blue Dent®
	ES		
	EN	Linha de produto / Línea de producto / Product line: Dentes Acrílicos / Dientes Acrílicos / Acrylic Teeth	

Contraindicaciones:	No existen efectos colaterales adversos conocidos, cuando el producto sea usado conforme los procedimientos usuales.
Almacenamiento:	Conservar ao abrigo de luz e calor.
Indicaciones de uso:	Los dientes acrílicos Blue Dent son indicados para confección de prótesis dentales totales o parciales.
Validez:	6 años a partir de la fecha de fabricación.

Químico Responsable: Rafael Gomes – CRQ 04263558
Registro MS-ANVISA N°: 80360110001



	PT	Ficha Técnica Hoja Técnica Technical Data Sheet	Marca Marca Brand Blue Dent®
	ES		
	EN	Linha de produto / Línea de producto / Product line: Dentes Acrílicos / Dientes Acrílicos / Acrylic Teeth	

Language:	English
Registration MS-ANVISA:	80360110001
Class device:	II
Composition:	Polymethylmetacrylate EGDMA (Ethyleneglycol dimethacrylate) Organic Biocompatible Pigments Fluorescent
Appearance:	Posteriors Packaging: 10 sets Anteriors Packaging: 16 sets Moulds Upper and Lower Anteriors: 2D, 3D, 3M, 2N, 3N, 3P, A23, A25, A26, 263, 264, 266, 4H, 2P, 38. Moulds Upper and Lower Posteriors: 30M, 32M, 30L, 32L, 34L. Trubyte® Shades: 61, 62, 65, 66, 67 e 69.
Product characteristics:	<ul style="list-style-type: none"> *33° Angulation on posteriors; *Two layers (Enamel and Dentine); *Shade stability; *Manufacturing from High Weight Molecular PMMA; *Absence of bubbles and porosities; *High mechanical; chemical and wear resistance; *Adherence to denture base acrylic resins; *Biocompatible Pigments; *Natural fluorescence; *Proportionality aesthetics, facial harmony;
Instructions for use:	<p>Follow the usual procedures for choice, waxing-up, articulation, polymerization, infection-control and maintenance of the prosthesis, as well as for individual protection.</p> <p>For an optimized bonding to the denture base resin, remove the gloss from the tooth base with a grinding instrument. After insulating the flask and prior to pack the acrylic dough, clean the base surface of the tooth using methylmethacrylate monomer.</p> <p>Recommendation: To increase the teeth durability it is highly recommended to avoid contact with alkalis, acids or other substances that can damage acrylic materials during the daily hygiene.</p>

	PT	Ficha Técnica	Marca Marca Brand Blue Dent®
	ES	Hoja Técnica	
	EN	Technical Data Sheet	
Linha de produto / Línea de producto / Product line: Dentes Acrílicos / Dientes Acrílicos / Acrylic Teeth			

Contraindications:	There are no known side effects, if the product is used according to usual procedures.
Storage:	Keep away from light and heat.
Indications:	The Blue Dent acrylic teeth are indicated for use in total or partial dental prosthesis.
Validity:	6 years from manufacturing.

Blue Dent

Responsible Chemistry: Rafael Gomes – CRQ 04263558
Registration MS-ANVISA: 80360110001

