	PT	Ficha Técnica Hoja Técnica Technical Data Sheet	Marca Marca Brand TRISUPER®
	ES		
	EN	Linha de produto / Línea de producto / Product line: Dentes Acrílicos / Dientes Acrílicos / Acrylic Teeth	


Idioma:	Português
Registro no MS-ANVISA:	80360110001
Classe de risco:	II
Composição:	Polimetacrilato de Metila EGDMA (Dimetacrilato de etilenoglicol) Pigmentos orgânicos Biocompatíveis Fluorescente
Apresentação:	Embalagem Posteriores: 05 placas Embalagem Anteriores: 08 placas Modelos Anteriores Superiores: R1, R2, R3, R4, R5, V3, V4, A2, A3, Z1, Z3, Z4, C1, C2, X1, X2, X4. Modelos Anteriores Inferiores : T2, T3, T5, T6, T7, T9. Modelos Posteriores Superiores e Inferiores: S2, S3, S4, S5. Cores: 1A, 2A, 3A, 2B, 4B, 1C, 2C, 1D, 1E e 3E.
Características:	<ul style="list-style-type: none"> *Angulação de 33° nos Posteriores; *Tripla Prensagem (Esmalte, Dentina e Cervical); *Estabilidade de Cores; *Produzido com Resina PMMA de alto peso molecular, combinado com Dupla Ligação Cruzada (DCL); *Ausência de bolhas e porosidades; *Alta resistência mecânica, química e a abrasão; *Aderência às Resinas acrílicas de base de próteses; *Pigmentos Biocompatíveis; *Fluorescência natural; *Proporcionalidade estética, harmonia facial;
Instrução de Uso:	Seguir os procedimentos usuais para escolha, montagem, articulação, acrilização, controle microbiológico, manutenção da prótese, bem como para proteção individual. Para melhor adesão dos dentes ao polímero da base da prótese, tirar o brilho da base do dente com uma lixa ou pedra abrasiva. Após isolamento da mufla e antes da aplicação da resina, limpar a base dos dentes com monômero de metilmetacrilato. Recomendação ao paciente: Para aumentar a durabilidade dos dentes, é recomendada, higienização diária sem uso de substâncias agressivas, como ácidos ou álcalis

	PT	Ficha Técnica Hoja Técnica Technical Data Sheet	Marca Marca Brand TRISUPER®
	ES		
	EN	Linha de produto / Línea de producto / Product line: Dentes Acrílicos / Dientes Acrílicos / Acrylic Teeth	

Contra indicações:	Não existem efeitos colaterais adversos conhecidos, quando o produto é usado conforme os procedimentos usuais
Armazenamento:	Conservar ao abrigo de luz e calor.
Indicações de uso:	Os dentes acrílicos TRISUPER são indicados para confecção de prótese dentária total e parcial.
Validade	6 anos a partir da data de fabricação.

Blue Dent

Químico Responsável: Rafael Gomes – CRQ 04263558
Registro MS-ANVISA N°: 80360110001

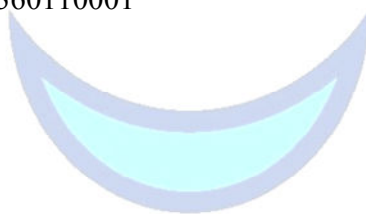

	PT	Ficha Técnica Hoja Técnica Technical Data Sheet	Marca Marca Brand TRISUPER®
	ES		
	EN	Linha de produto / Línea de producto / Product line: Dentes Acrílicos / Dientes Acrílicos / Acrylic Teeth	


Idioma:	Español
Registro en MS-ANVISA:	80360110001
Clase de riesgo:	II
Composición:	Polimetilmetacrilato EGDMA (Dimetacrilato de etilenoglicol) Pigmentos orgánicos Biocompatibles Fluorescente
Presentación:	Embalaje Posteriores: 05 juegos Embalaje Anteriores: 08 juegos Modelos Anteriores Superiores: R1, R2, R3, R4, R5, V3, V4, A2, A3, Z1, Z3, Z4, C1, C2, X1, X2, X4. Modelos Anteriores Inferiores : T2, T3, T5, T6, T7, T9. Modelos Posteriores Superiores y Inferiores: S2, S3, S4, S5. Colores: 1A, 2A, 3A, 2B, 4B, 1C, 2C, 1D, 1E y 3E.
Características del producto:	<ul style="list-style-type: none"> *Angulación de 33° en los posteriores; *Prensado en tres capas (Esmalte, Dentina y Cervical); *Estabilidad de colores; *Producido con PMMA de alto peso molecular, combinado con Doble Union Cruzada (DCL); *Ausencia de burbujas y porosidades; *Alta resistencia mecánica, química y a abrasión; *Adherencia a las Resinas acrílicas de base de prótesis; *Pigmentos Biocompatibles; *Fluorescencia natural; *Proporcionalidad estética, armonía facial;
Instrucciones de uso:	Seguir los procedimientos usuales para selección, montaje, articulación, polimerización, control microbiológico y mantenimiento de la prótesis, como para protección individual. Para mejor adhesión de los dientes al polímero de la base de la prótesis, quitar el brillo de la base del diente con una lija o piedra abrasiva. Después de aislada la mufla y antes de La aplicación de la resina, limpiar la base de los dientes con monómero de metilmetacrilato. Recomendaciones al paciente: Para aumentar la durabilidad de los dientes, es recomendada una higienización diaria sin uso de sustancias agresivas, como ácidos ou álcalis

	PT	Ficha Técnica Hoja Técnica Technical Data Sheet	Marca Marca Brand TRISUPER®
	ES		
	EN	Linha de produto / Línea de producto / Product line: Dentes Acrílicos / Dientes Acrílicos / Acrylic Teeth	

Contraindicaciones:	No existen efectos colaterales adversos conocidos, cuando el producto sea usado conforme los procedimientos usuales.
Almacenamiento:	Conservar ao abrigo de luz e calor.
Indicaciones de uso:	Los dientes acrílicos TRISUPER son indicados para confección de prótesis dentales totales o parciales.
Validez:	6 años a partir de la fecha de fabricación.

Blue Dent

Químico Responsable: Rafael Gomes – CRQ 04263558
Registro MS-ANVISA N°: 80360110001

	PT	Ficha Técnica Hoja Técnica Technical Data Sheet	Marca Marca Brand TRISUPER®
	ES		
	EN	Linha de produto / Línea de producto / Product line: Dentes Acrílicos / Dientes Acrílicos / Acrylic Teeth	

Language:	English
Registration MS-ANVISA:	80360110001
Class device:	II
Composition:	Polymethylmetacrylate EGDMA (Ethyleneglycol dimethacrylate) Organic Biocompatible Pigments Fluorescent
Appearance:	Posteriors Packaging: 05 sets Anteriors Packaging: 08 sets Moulds Upper Anteriors: R1, R2, R3, R4, R5, V3, V4, A2, A3, Z1, Z3, Z4, C1, C2, X1, X2, X4. Moulds Lower Anteriors: T2, T3, T5, T6, T7, T9. Moulds Upper and Lower Posteriors: S2, S3, S4, S5. Shades: 1A, 2A, 3A, 2B, 4B, 1C, 2C, 1D, 1E and 3E.
Product characteristics:	<ul style="list-style-type: none"> *33° Angulation on posteriors; *Three layers (Enamel, Dentine and Cervical); *Shade stability; *Manufacturing from High Weight Molecular PMMA, combined with Double Cross Linked (DCL); *Absence of bubbles and porosities; *High mechanical; chemical and wear resistance; *Adherence to denture base acrylic resins; *Biocompatible Pigments; *Natural fluorescence; *Proportionality aesthetics, facial harmony;
Instructions for use:	<p>Follow the usual procedures for choice, waxing-up, articulation, polymerization, infection-control and maintenance of the prosthesis, as well as for individual protection.</p> <p>For an optimized bonding to the denture base resin, remove the gloss from the tooth base with a grinding instrument. After insulating the flask and prior to pack the acrylic dough, clean the base surface of the tooth using methylmethacrylate monomer.</p> <p>Recommendation: To increase the teeth durability it is highly recommended to avoid contact with alkalis, acids or other substances that can damage acrylic materials during the daily hygiene.</p>

	PT	Ficha Técnica Hoja Técnica Technical Data Sheet	Marca Marca Brand TRISUPER®
	ES		
	EN	Linha de produto / Línea de producto / Product line: Dentes Acrílicos / Dientes Acrílicos / Acrylic Teeth	

Contraindications:	There are no known side effects, if the product is used according to usual procedures.
Storage:	Keep away from light and heat.
Indications:	The TRISUPER acrylic teeth are indicated for use in total or partial dental prosthesis.
Validity:	6 years from manufacturing.

Blue Dent

Responsible Chemistry: Rafael Gomes – CRQ 04263558
Registration MS-ANVISA: 80360110001